Laboratuvar Çeker Ocak

LT-G0248 | Gaz ve buharların tahliye hattına yönlendirilmesi

Kademeli fan kontrolü • Giyotin ön cam • Aydınlatmalı çalışma alanı



1000 / 1250 / 1750

FAN KAPASİTESİ SEÇENEKLERİ (m^3/h)

800 lux

FLORESAN AYDINLATMA

Ayarlanabilir emiş • Epoksi elektrostatik toz boyalı kabin

LT-G0248

Fotoğraf ve Kabin Bileşenleri

Ön çalışma alanı, kumanda, çalışma yüzeyi ve opsiyonel alt dolap

LT-G0248, işlem bölgesindeki havayı fan ve bağlı tahliye hattına yönlendirir. Hareketli ön cam çalışma açıklığını sınırlar. Kabin donanımını yapılacak işleme ve laboratuvarın bağlantı düzenine göre seç.

ÖN CAM VE ÇALIŞMA AÇIKLIĞI

Giyotin tip temperli cam dikey hareket eder. Çalışma açıklığını önerilen seviyede tut.

KUMANDA ALANI

Fan kontrolünü ve çalışma ayarlarını yönetir. Emişi işleme uygun ayarla.



ÇALIŞMA YÜZEYİ

Deney ekipmanlarını kabin içinde düzenle. Yüzey malzemesini kullanılan kimyasala göre seç.

OPSİYONEL ALT DOLAP

Alt dolap, evye ve servis bağlantıları ihtiyaca göre seçilen donanımlardır.



Kabin içi çalışma alanı ve örnek servis donanımı




Ön panel prizleri ve kumanda bağlantıları

LT-G0248

Kaynağında Yakalama ve Hava Tahliyesi

Emişi kontrol et • Camı konumlandır • İşlemi uygula • Kabini temizle

ÖN AÇIKLIKTAN KABİN İÇİNE HAVA AKIŞI

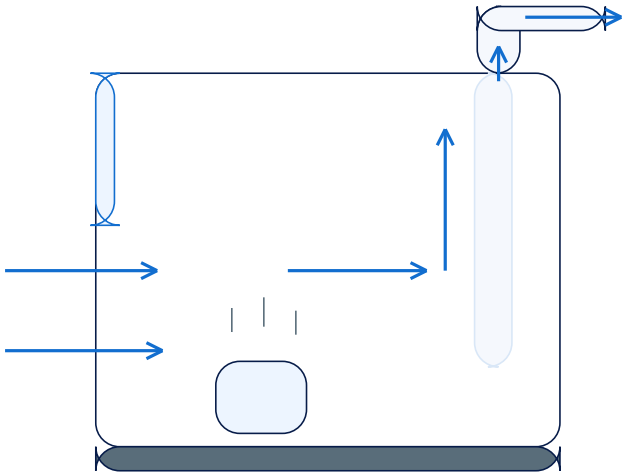

ODA HAVASI • İŞLEM BÖLGESİ • TAHLİYE HATTI

KİRLİ HAVA TAHLİYE HATTINA YÖNELİR

ÖN CAM + ÇALIŞMA ALANI + FAN SİSTEMİ

EMİŞ KOŞULU: FAN VE BAĞLI KANALLA BİRLİKTE

Çalışma açıklığı ve hava yolunu düzenli tut

TEMSİLİ YAN KESİT • ÖLÇEKSİZ

Emişi Kontrol Et

Fanı ve bağlı tahliye hattını kontrol et. Emiş düzenini yapılacak işleme göre ayarla.

Camı Konumlandır

Ön camı önerilen çalışma seviyesine getir. Açıklığı gereksiz yere genişletme.

Çalışma Alanını Düzenle

Malzemeleri kabin içinde konumlandır. Hava geçişini engellemeden işlemi yürüt.

Fan, ön açıklıktan kabin içine hava girişini destekler ve işlem bölgesindeki havayı tahliye hattına taşır. Çeker ocağın çalışma koşulları; ön cam konumuna, kabin içindeki yerleşime ve bağlı kanal sistemine bağlıdır. Emiş kapasitesini bu düzenle birlikte değerlendir.

Fan Seçenekleri ve Yerleşim

Ürün grubunda 1000, 1250 ve 1750 m^3/h fan kapasitesi seçenekleri bulunur. Kademeli hız kontrolü emiş ayarını destekler.

Fan kapasitesi seçimini ve tahliye bağlantısını uygulamaya göre yap. Çalışma alanını gereksiz malzemeyle doldurma; ön açıklık ve kabin içindeki hava yolunu açık tut. Kurulum sonrası çalışma koşullarını kontrol et.

Çalışma Yüzeyi ve Servis Donanımı

Su, gaz, evye ve alt dolap opsiyoneldir. Çalışma yüzeyi için antiasit kompakt laminat, seramik, granit ve paslanmaz çelik seçenekleri yer alır.

Yüzeyi ve bağlantıları kimyasal uyuma göre seç. İşlem sonunda kalıntıları uygun yöntemle temizle. Cam hareketini, aydınlatmayı, prizleri ve tahliye bağlantılarını düzenli kontrol et.

LT-G0248

Teknik Özellikler ve Donanım Seçenekleri

LT-G0248 • Fan, ön cam, aydınlatma ve opsiyonel kabin donanımı

Teknik Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-G0248
Ürün Adı	Laboratuvar Çeker Ocak
Fan Kapasitesi Seçenekleri	1000 / 1250 / 1750 m^3/h
Emiş Kontrolü	Kademeli fan hız kontrolü
Ön Cam Düzeni	Giyotin tip • Denge ağırlıklı ray sistemi
Ön Cam Malzemesi	Temperli cam
Kabin Yüzeyi	Epoksi elektrostatik toz boya
Aydınlatma	800 lux • Floresan
Gürültü Seviyesi	55 dBA
Elektrik Beslemesi	220 V, 50 Hz
Ön Panel Donanımı	Topraklı elektrik prizleri
Opsiyonel Servis Donanımı	Su, gaz, evye ve alt dolap
Opsiyonel Çalışma Yüzeyleri	Kompakt laminat, seramik, granit, paslanmaz çelik

Uygulamaya Uygun Kabin ve Tahliye Düzeni

Fan kapasitesini, çalışma yüzeyini ve servis bağlantılarını laboratuvar işlemlerine göre seç. Ön camı uygun seviyede tut; fan ve tahliye hattının birlikte çalışmasını kontrol et.

Çalışma Hazırlığından Kabin Bakımına

01
Kontrol Et
Fanı, tahliye bağlantısını ve alanı kontrol et.

02
Konumlandır
Ön camı ve deney ekipmanını yerleştir.

03
Uygula
Emişi ayarla; işlemi kabin içinde yürüt.

04
Temizle
Kalıntıları uzaklaştır ve çalışma alanını düzenle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/ceker-ocak/