Desikatör Kabini

LT-G0103 / LT-G0104 | Düşük nemli laboratuvar depolaması

Şeffaf akrilik kabin • Alüminyum çerçeve • Dijital sıcaklık ve nem takibi



160 L

LT-G0103 KAPASİTE

200 L

LT-G0104 KAPASİTE

Delikli raflar • Sabit veya ayarlanabilir raf seçeneği • Alt desikant tepsisi

LT-G0103 / LT-G0104

Fotoğraflar ve Bileşenler

Şeffaf paneller, delikli raflar, dijital gösterge ve alt tepsi

Desikatör Kabini, neme duyarlı laboratuvar malzemeleri için düzenli bir saklama alanı sunar. Şeffaf paneller iç yerleşimi görünür kılar; dijital gösterge kabin sıcaklığını ve nemini izlemeyi sağlar.

DİJİTAL GÖSTERGE

Kabin içindeki sıcaklık ve nem de erlerinin izlenmesini sa lar.

ŞEFFAF KABİN

Akrilik paneller, kapı açılmadan iç bölümün görülmesine yardımcı olur.



DELİKLİ RAFLAR

Delikli yüzeyler, raf seviyeleri arasında hava dolaşımını destekler.

ALT DESİKANT TEPSİSİ

Nem alıcı malzeme için raflardan ayrı bir yerleşim alanı oluşturur.



Dijital sıcaklık ve nem göstergesi




Delikli raf ve raf konumlandırma rayı

LT-G0103 / LT-G0104

Desikantla Nem Tutma Prensibi

Kabin içi hava • Nem alıcı malzeme • Sıcaklık ve nem izleme

ÇALIŞMA PRENSİBİ

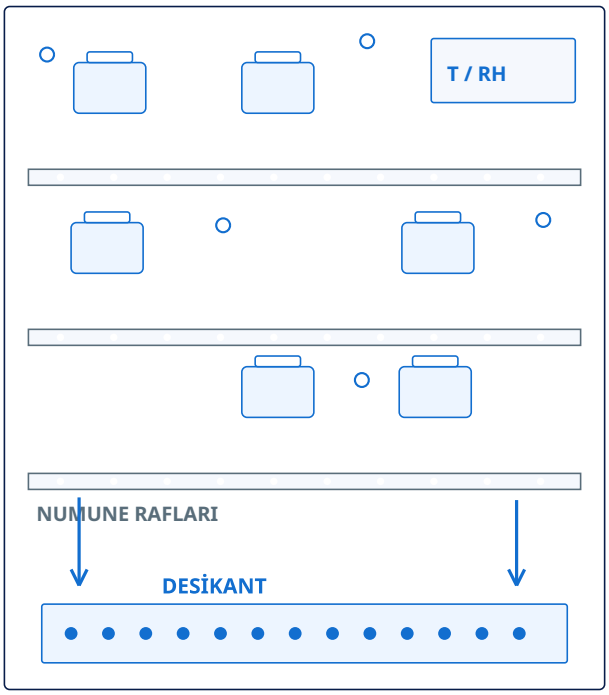

Nem Tutma

Alt tepsideki desikant, kabin havasındaki su buharını tutar.

Hava Dolaşımı

Delikli raflar, hava ile nem alıcı malzeme arasındaki etkileşimi destekler.

Koşulları İzleme

Dijital gösterge, kabin içindeki sıcaklık ve nemin takibinde kullanılır.

Desikantın durumu, depolama ortamının nemini etkiler. Kabin içindeki değerlerin izlenmesi ve nem alıcı malzemenin düzenli kontrolü, depolama koşullarının takibini kolaylaştırır.

Numune Yerleşimi

Kapları etiketleri görülecek şekilde yerleştir. Numuneleri alt desikant alanından ayrı tut ve raf yüzeylerindeki delikleri tamamen kapatacak yerleşimden kaçın.

Kapı Açma ve Nem Takibi

Şeffaf panellerden içeriği kontrol et. Kapıyı yalnızca gerekli süre boyunca açık tut. Nem yükseldiğinde desikantı kontrol et; malzeme talimatına göre yenile veya rejenere et.

Model Seçenekleri ve Teknik Veriler

LT-G0103 / LT-G0104 • Kapasite, kabin yapısı ve depolama akışı

Ürün Kodu	Kapasite	Ağırlık
LT-G0103	160 L	20 kg
LT-G0104	200 L	-

Ortak Özellik	Yapı / İşlev
Kabin Panelleri	Şeffaf akrilik (PMMA)
Taşıyıcı Çerçeve	Alüminyum
Dijital Gösterge	Sıcaklık ve nem takibi
Raf Seçeneği	Sabit veya ayarlanabilir
Raf Yüzeyi	Delikli yapı
Alt Tepsi	Desikant yerleşim alanı

Hacme Göre Model Seçimi

160 L ve 200 L seçeneklerini numune miktarı ve kap boyutlarına göre değerlendir. Raf düzeninde numunelere erişim ve hava dolaşımı için boşluk bırak.

Depolama Akışı

01
Hazırla
Desikantı alt tepsiye yerleştir.

02
Düzenle
Numuneleri etiketleriyle raflara al.

03
Kapat ve İzle
Kapıyı kapat; sıcaklık ve nemi takip et.

04
Kontrol Et
Desikantı ve saklama koşullarını kontrol et.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/desikator-kabini/