Dijital Terazi

LT-G4045 - LT-G4050 | Altı kapasite ve okunabilirlik seçeneği

Gerinim tipi yük hücresi • LCD ekran • Şarjlı batarya



600 g-30 kg

AZAMİ KAPASİTE SEÇENEKLERİ

0,01-0,5 g

MODELE GÖRE OKUNABİLİRLİK

Agrega • Beton • Maden • Yapı malzemesi numuneleri

LT-G4045 - LT-G4050

Fotoğraf ve Tartım Bileşenleri

Tartım tablası, LCD ekran ve ön kontrol paneli

Kompakt terazi serisi, numune kütlesini tezgâh üzerinde ölçmek için farklı kapasite ve okunabilirlik seçenekleri sunar. Gerinim tipi yük hücresi ve arkadan aydınlatmalı LCD ekran tartım sistemini oluşturur.

TARTIM TABLASI

Kabı veya numuneyi dengeli biçimde yerleştir. Toplam yükü model kapasitesinde tut.

KONTROL TUŞLARI

Sıfırlama, dara ve kalibrasyon işlemleri ön panelden yürütülür.




LCD EKRAN


Kararlı kütle değerini ve tartım durumunu ön ekrandan takip et.

KOMPAKT GÖVDE

270 × 220 mm gövde ölçüsü tezgâh üstü kullanımı destekler.

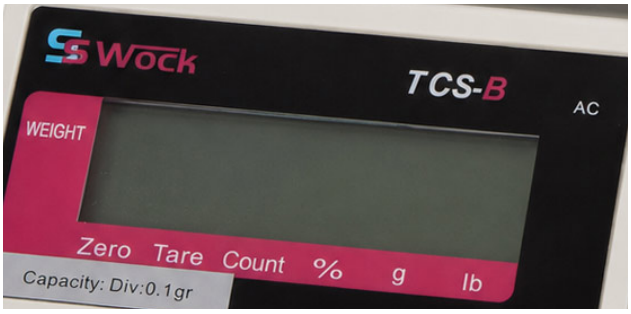

LCD tartım ekranı ve durum işaretleri

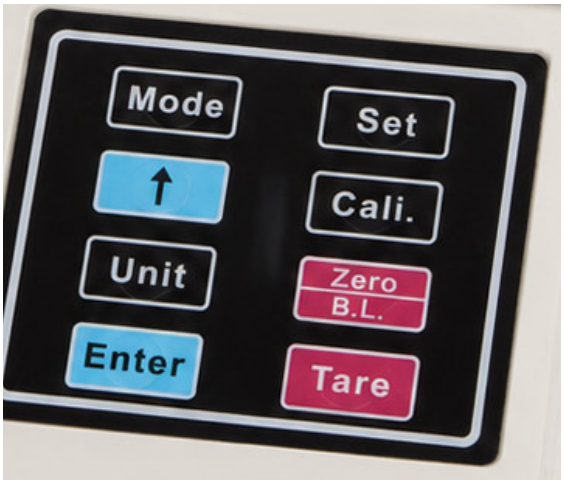

Sıfırlama, dara ve kalibrasyon tuşları

Dara ile Net Numune Kütlesi

Modeli seç • Sıfırla • Kabın darasını al • Numuneyi tart



Modeli Seç ve Sıfırla

Toplam yükü kapasiteyle karşılaştır. Boş tablaya ait sıfır değerini doğrula.

Dara ve Yükleme

Boş kabı yerleştir ve dara al. Numuneyi kap içinde dengeli yükle.

Oku ve Kaydet

Değer kararlı olduğunda net kütleyi kaydet. Kapasiteyi aşmadan işlemi tamamla.

Tablaya uygulanan yük, gerinim tipi yük hücresinde elektrik sinyaline dönüşür. Elektronik sistem kütle değerini LCD ekrana aktarır. Dara işlemi boş kabın kütlesini çıkarır; net numune kütlesi kararlı okuma üzerinden kaydedilir.

Kapasite ve Okunabilirlik Seçimi

600, 3000 ve 6000 g kapasitelerde 0,01 g okunabilirlik seçenekleri bulunur. 6000 g için 0,1 g; 30 kg için 0,5 ve 0,1 g seçenekleri sunulur.

Kap ve numune yükünü birlikte değerlendir. Okunabilirliği deney ihtiyacına göre seç; gösterge basamak sayısını doğruluk değeri olarak yorumlama.

LT-G4050 ile Alttan Tartım

LT-G4050, 30 kg kapasite ve 0,1 g okunabilirlikle alttan tartım imkânı sunar. Mekanik kanca, uygun özgül ağırlık deney düzeniyle birlikte kullanılabilir.

Numune su içinde askıda tartılabilir. Kuru ve su içindeki kütleleri ilgili deney yöntemine göre değerlendir. Numunenin kap yüzeylerine temas etmesini önle.

Model Karşılaştırması ve Ortak Özellikler

Altı model • Kapasite, okunabilirlik ve alttan tartım seçeneği

Ürün Kodu	Kapasite (g)	Okunabilirlik (g)	Alttan Tartım
LT-G4045	600	0,01	-
LT-G4046	3000	0,01	-
LT-G4047	6000	0,01	-
LT-G4048	6000	0,1	-
LT-G4049	30000	0,5	-
LT-G4050	30000	0,1	Mevcut

Ortak Özellik	Değer / Açıklama
Tartım Sistemi	Gerinim tipi yük hücresi • Aydınlatmalı LCD
Gövde Boyutları	270 × 220 mm
Ağırlık	5 kg
Besleme	Şarjlı batarya • 220 V adaptör
Çalışma Sıcaklığı	0-40 °C
Kalibrasyon	Harici referans kütlelerle

Tartım Öncesi Sıfır ve Referans Kontrolü

Teraziyi dengeli, titreşimsiz bir yüzeye yerleştir. Uygun referans kütleyle kontrol yap; boş kabın darasını aldıktan sonra kararlı numune kütlesini kaydet.

Boş Tabladan Net Tartım Sonucuna

01
Sıfırla
Boş tablaya ait sıfır değerini kontrol et.

02
Dara Al
Boş kabı yerleştir ve darasını al.

03
Yükle
Numuneyi dengeli biçimde yerleştir.

04
Kaydet
Kararlı net kütleyi ve numune kodunu kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/dijital-terazi/