Diskli Öğütücü Ø200 × 30 mm

LT-A0073 | Sert ve kırılgan numunelerin hazırlanması

Karşılıklı öğütme diskleri • Kademesiz açıklık ayarı • V-kayışlı tahrik



Ø200 × 30 mm

ÖĞÜTME DİSKİ ÖLÇÜSÜ

0-10 mm

DİSK AÇIKLIĞI AYARI

Orta sert, sert, kırılgan ve tok numuneler • Maden, çimento, seramik ve cam

LT-A0073

Fotoğraflar ve Bileşenler

Besleme bölümü, karşılıklı disk yüzeyleri, tahrik ve numune çekmecesi


LT-A0073, numuneyi karşılıklı öğütme diskleri arasında mekanik kuvvetle küçültür. 0-10 mm kademesiz açıklık ayarı, farklı malzemeler için öğütme koşullarını düzenlemeyi sağlar.

BESLEME BÖLÜMÜ

Üst besleme bölümü numuneyi öğütme alanına aktarır.

ÖĞÜTME DİSKLERİ

Karşılıklı disk yüzeyleri, basınç ve kesme etkisiyle numuneyi küçültür.

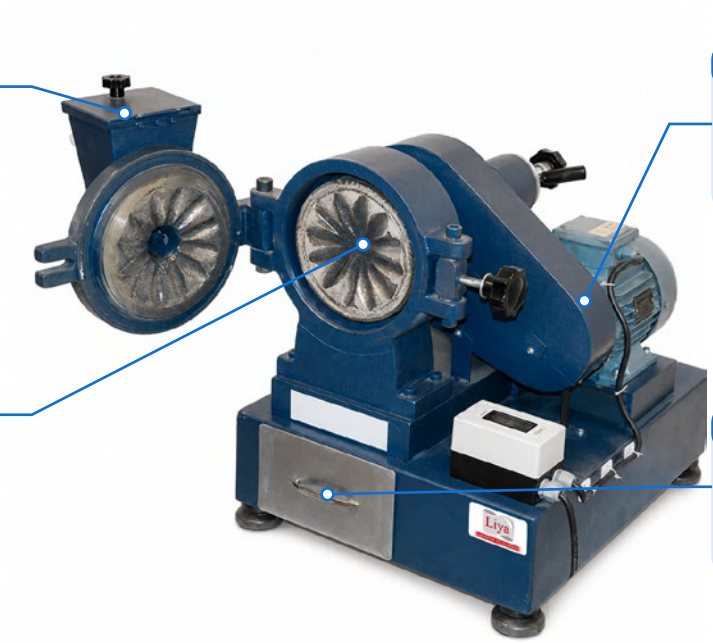

TAHRİK SİSTEMİ

Motor hareketi V-kayış üzerinden öğütme mekanizmasına aktarılır.

NUMUNE ÇEKMECESİ

Alt çekmece, öğütülmüş numunenin alınması için erişim sunar.



Karşılıklı öğütme diskleri ve besleme ağzı




Motor, tahrik muhafazası ve kumanda

LT-A0073

Diskli Öğütme Prensibi

Basınç ve kesme etkisi • 0-10 mm kademesiz açıklık ayarı

Disk Yüzeyi

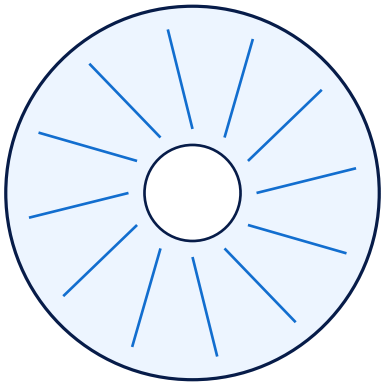


Ø200 × 30 mm

DİSK ÖLÇÜSÜ

Karşılıklı Diskler

0-10 mm

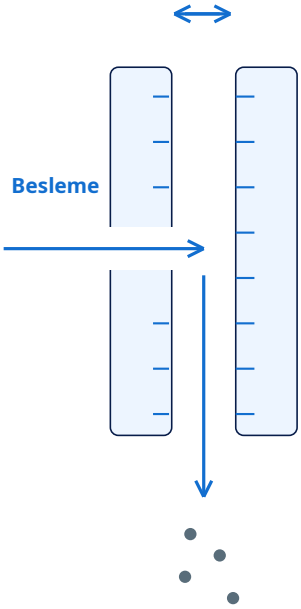

AÇIKLIK AYAR ARALIĞI

Karşılıklı diskler numuneyi basınç ve kesme etkisiyle küçültür. Dar açıklık daha ince, geniş açıklık daha iri ürün elde etmeye yardımcı olur. Son tane boyutu, numunenin özelliklerine ve çalışma koşullarına bağlıdır.

Uygun Numune Grupları

01
Mineraller
Bazalt ve feldispat

02
Çimento
Çimento klinkeri

03
Seramik
Seramik ve şamot

04
Cam
Cam numuneleri

05
Katı Yakıtlar
Kömür ve kok

06
Diğer Malzemeler
Alaşımlar ve yapı malzemeleri

LT-A0073

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A0073 • Disk açıklığı, dış ölçüler ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-A0073
Öğütme Diski Ölçüsü	Ø200 × 30 mm
Disk Açıklığı Ayar Aralığı	0-10 mm
Açıklık Ayar Türü	Kademesiz
Tahrik Sistemi	V-kayış
Dış Ölçüler	65 × 60 × 120 cm
Yaklaşık Ağırlık	200 kg
Elektrik Beslemesi	380 V, 50-60 Hz, 3 faz

Tane Boyutunu Etkileyen Parametreler

Disk açıklığı, başlangıç tane boyutu, sertlik, kırılganlık ve nem öğütme sonucunu etkiler. Numuneye uygun açıklık ve besleme düzeni, deneyle belirlenir.

Numune Hazırlama Akışı

01

Ön Hazırlık

İri parçaları gerektiğinde uygun kırıcıyla küçült.

02

Açıklığı Ayarla

Disk açıklığını numuneye ve hedef boyuta göre seç.

03

Numuneyi Öğüt

Numuneyi besleme bölümüne kontrollü aktar.

04

Numuneyi Al

Öğütülmüş ürünü sonraki analize hazırla.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/diskli-ogutucu-o200x30mm/