Flux Mikseri

LT-M0256 | Mineral numunesi ve fluks tozunun mekanize karıştırılması

Çoklu numune hazırlama • Farklı kap düzenleri • Bağımsız veya entegre kullanım



25 adet

NUMUNE KAPASİTESİ

220 V

50 Hz / TEK FAZ BESLEME

Füzyon öncesi karıştırma • Liya Test fluks dağıtıcıyla birlikte kullanım

LT-M0256

Fotoğraflar ve Bileşenler

Ön yükleme kapağı, gövde, kumanda paneli ve acil durdurma

LT-M0256, ateş analizi öncesinde mineral numunelerini fluks tozuyla karıştırır. Mekanize işlem, tekrarlanan elle karıştırmayı azaltır ve çoklu numunelerin düzenli hazırlanmasını destekler.

YÜKLEME KAPAĞI

Ön kapak ve tutamak, karıştırma bölümüne erişim sağlar.

KUMANDA PANELİ

Göstergeler ve çalışma kumandaları sağ tarafta bir aradadır.



MAKİNE GÖVDESİ

Kapalı gövde, numune hazırlama çalışma bölümünü çevreler.

ACİL DURDURMA

Kırmızı mantar buton, kumanda paneli üzerinde bulunur.



Ön kapak ve yükleme tutamağı




Göstergeler, kumandalar ve acil durdurma

LT-M0256


Numune ve Fluksun Karıştırılması

Mineral numunesi + fluks • Mekanize karıştırma • Füzyon öncesi hazırlık

KARIŞTIRMA ÖNCESİ

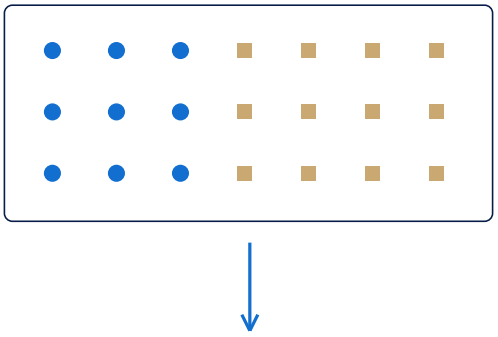

KARIŞTIRMA SONRASI

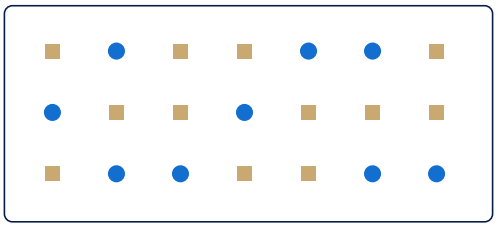

Mineral numunesi

Fluks tozu

Numune ve Fluks

Numune ve fluks, seçilen ateş analizi yöntemine uygun miktarlarda hazırlanır.

Mekanize İşlem

Cihaz, tekrarlanan karıştırma hareketlerini mekanik olarak gerçekleştirir.

Sonraki Aşama

Karıştırılan numune, laboratuvarın füzyon öncesi hazırlık akışına alınır.

Karışım şeması, numune ve fluksun kap içinde dağılımını gösterir. Tutarlı hazırlık için kap yerleşimi, numune miktarı ve uygulanan karıştırma koşulları deney grubu boyunca kaydedilir.

Çoklu Numune Düzeni

25 adet kapasite, hazırlık grubundaki numunelerin birlikte planlanmasını sağlar. Kapları numune kimlikleriyle eşleştir; karıştırma sonrasında aynı sıra ve etiket düzenini koru.

Fluks Dağıtıcıyla Birlikte Kullanım

Cihaz bağımsız çalışabilir veya Liya Test fluks dağıtıcıyla birlikte kullanılabilir. Dozlama ve karıştırma adımlarını ardışık düzenlemek, yüksek sayıda numunenin hazırlanmasını destekler.

Teknik Veriler ve Hazırlama Akışı

LT-M0256 • Kapasite, kap uyumu ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-M0256
Ürün Adı	Flux Mikseri
Numune Kapasitesi	25 adet
Karıştırılan Malzemeler	Mineral numunesi ve fluks tozu
Temel Uygulama	Ateş analizi / füzyon öncesi hazırlık
İşlem Türü	Mekanize karıştırma
Kap Uyumu	Farklı kap boyutları ve yerleşimleri
Kullanım Düzeni	Bağımsız veya fluks dağıtıcıyla birlikte
Elektrik Beslemesi	220 V, 50 Hz, tek faz

Kap Düzeni ve Numune Kimliği

Kap seçimini mevcut ateş analizi hazırlık düzeniyle eşleştir. Numune kimliği ve fluks miktarı kayıtlarını karıştırmadan füzyon hazırlığına kadar koru.

Numune Hazırlama Akışı

01
Hazırla
Numuneyi ve y ntem fluksunu hazırla.

02
Yerleştir
Kapları etiketleriyle çalışma bölümüne al.

03
Karıştır
Kapak ve kumandalarla işlemi yürüt.

04
Sonraki Aşamaya Al
Karışımı füzyon hazırlık akışına aktar.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/flux-mikseri/