Mekanik Terazi

LT-G4000 / LT-G4001 | Cent-O-Gram ve Dial-O-Gram

Elektriksiz çalışma • Manyetik sönümleme • Çıkarılabilir kefe



311 / 310 g

MODELE GÖRE MAKSİMUM KAPASİTE

0,01 g

SKALA OKUNABİLİRLİĞİ

Hafif numuneler • Tozlar • Genel laboratuvar tartımları

LT-G4000 / LT-G4001

Fotoğraf ve Mekanik Tartım Bileşenleri

Cent-O-Gram örneği: askılı kefe, kayar ağırlıklar ve kiriş skalaları

LT-G4000 Cent-O-Gram 311 g, LT-G4001 Dial-O-Gram 310 g kapasite sunar. Her iki model 0,01 g okunabilirlikle elektriksiz çalışır. Fotoğraftaki Cent-O-Gram, kiriş ve kayar ağırlık düzenini gösterir.

ASKILI KEFE

Numuneyi veya tartım kabını çıkarılabilir paslanmaz kefeye yerleştir.

KİRİŞ SKALALARI

Denge sağlandığında kütle değerlerini ölçeklerden oku.




KAYAR AĞIRLIKLAR

Kiriş üzerindeki ağırlıkları hareket ettirerek dengeyi ayarla.

TAŞIYICI GÖVDE

Metal taban ve taşıyıcı yapı, mekanik tartım düzenini destekler.

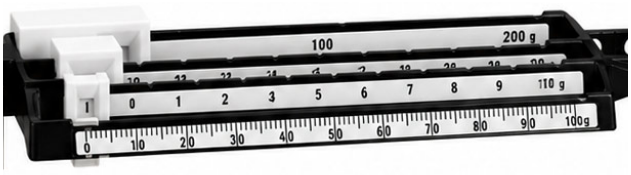

Kiriş skalaları ve kayar ağırlık düzeni




Çıkarılabilir paslanmaz çelik kefe

LT-G4000 / LT-G4001

Kiriş Dengesi ile Mekanik Tartım

Sıfırı ayarla • Numuneyi yükle • Dengele • Skala değerlerini oku

NUMUNE + KİRİŞ + KAYAR AĞIRLIKLAR

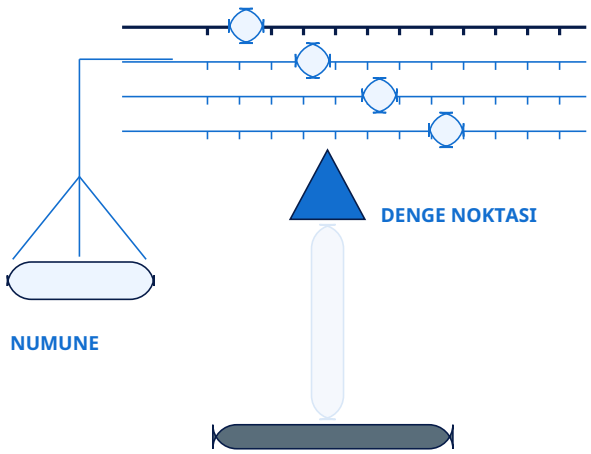

DENGE SAĞLANDIĞINDA SKALADAN OKU

SIFIR AYARI • KAYAR AĞIRLIK • DENGE

KİRİŞ DEĞERLERİ + VARSA KADRAN DEĞERİ

Kütle = Okunan değerlerin toplamı

TEMSİLİ TARTIM ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Sıfır Noktasını Ayarla

Boş kefede dengeyi kontrol et. Mekanik sıfırlama ayarıyla başlangıç konumunu düzelt.

Yükle ve Dengele

Numuneyi kefeye yerleştir. Kayar ağırlıkları, denge sağlanana kadar ayarla.

Skalayı Oku ve Kaydet

Denge konumunda kirişleri oku. Dial-O-Gram modelinde ince kadran değerini de ekle.

Mekanik terazi, numune yükünü kiriş ve hareketli ağırlık sistemiyle dengeler. Manyetik sönümleme salınımı azaltmaya yardımcı olur. Kütle, dengede okunan değerlerden belirlenir; okunabilirlik tek başına ölçüm doğruluğunu tanımlamaz.

Cent-O-Gram ve Dial-O-Gram

LT-G4000 Cent-O-Gram, 311 g kapasite ve kayar ağırlıklı kiriş düzeni sunar. Kullanıcı kirişlerdeki kütle değerlerini birleştirir.

LT-G4001 Dial-O-Gram, 310 g kapasitededir. Verniyer kadran, ince kütle ayarını destekler. Her iki modelde skala okunabilirliği 0,01 g'dır.

Kefe, Sıfır ve Referans Kontrolü

Çıkarılabilir paslanmaz kefe yaklaşık Ø89 × 13 mm ölçüsündedir. Kefeyi temiz tut; tartım sırasında serbest asılmasını ve çevreye temas etmemesini sağla.

Her tartım öncesinde boş kefe sıfırını kontrol et. Uygun referans kütleyle ara kontrol yap; titreşim ve hava akımlarının etkisini azalt.

Model Karşılaştırması ve Ortak Özellikler

İki mekanik model • Kapasite, okunabilirlik ve kefe düzeni

Ürün Kodu	Model	Kapasite (g)	Okunabilirlik (g)
LT-G4000	Cent-O-Gram	311	0,01
LT-G4001	Dial-O-Gram	310	0,01

Ortak Özellik	Değer / Açıklama
Çalışma Düzeni	Mekanik • Elektrik beslemesi gerektirmez
Kefe Malzemesi	Paslanmaz çelik
Kefe Ölçüsü	Yaklaşık Ø89 × 13 mm
Kefe Tipi	Çıkarılabilir, askılı
Sönümleme	Manyetik sönümleme
Sıfırlama	Mekanik sıfır ayarı
Kiriş Düzeni	Kendi hizalanan kiriş tasarımı
Gövde	Metal taban ve kiriş takımı

Kapasiteyi ve Denge Koşulunu Birlikte Kontrol Et

Kap ve numunenin toplam yükünü model kapasitesinin içinde tut. Kefe sıfırını ayarla; salınım azaldıktan ve denge sağlandıktan sonra okunan değerleri kaydet.

Boş Kefeden Mekanik Tartım Sonucuna

01
Sıfırla
Boş kefenin denge ve sıfırını ayarla.

02
Yükle
Kabı veya numuneyi kefeye yerleştir.

03
Dengele
Kayar ağırlıkları ve varsa kadranı ayarla.

04
Oku
Değerleri birleştir ve kütleyi kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/mekanik-terazi/