Şişe Döndürme Test Cihazı

LT-M0614 / LT-M0615 | Dijital ve analog masa tipi modeller

Yatay şişe dönüşü • Ayarlanabilir hız • Farklı şişe hacimleri



30 dev/dk

AZAMİ ANA MİL HIZI

2 şişe

EŞ ZAMANLI DÖNDÜRME KAPASİTESİ

Masa tipi tasarım • Sürekli döndürme • Kontrollü numune hazırlama

LT-M0614 / LT-M0615

Fotoğraf ve Cihaz Bileşenleri

Hız ayarı, çalışma kontrolleri, şişeler ve döndürme milleri

Masa tipi şişe döndürme cihazı, iki şişeyi yatay eksenleri etrafında aynı anda hareket ettirir. Ayarlanabilir ana mil hızı, farklı şişe boyutları ve numune özelliklerine uygun karıştırma koşullarının seçilmesini sağlar.

HIZ AYARI

Ana mil hızı, çalışma gereksinimine göre 30 dev/dk'ya kadar ayarlanabilir.

YATAY ŞİŞELER

İki şişe aynı anda döndürülebilir. Şişeler ve uyumlu huniler ayrıca sipariş edilebilir.



ÇALIŞMA KONTROLLERİ


Ön paneldeki başlatma, durdurma ve zaman ayarı elemanları çalışma sürecini yönetir.

DÖNDÜRME MİLLERİ

Şişeleri taşıyan mil / merdane düzeni, kontrollü dönüş hareketini şişelere aktarır.



Hız, zaman ve başlatma / durdurma kontrolleri

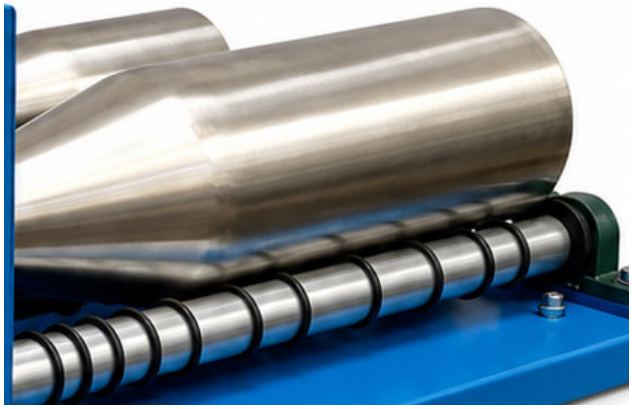


Şişe yerleşimi ve mil / merdane döndürme düzeni

LT-M0614 / LT-M0615

Yatay Dönüş ile Numune Karıştırma

Şişeyi seç • Yerleştir • Hızı ayarla • Döndür

İKİ ŞİŞE + DÖNDÜRME MİLLERİ + HIZ AYARI

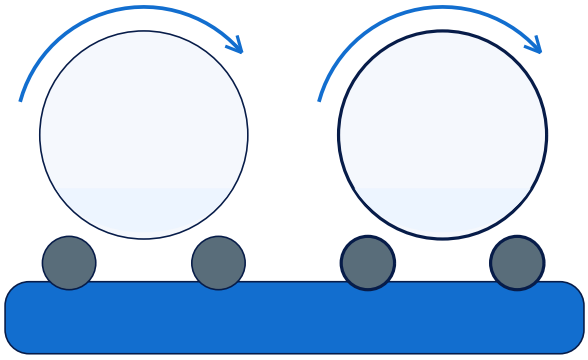

ANA MİL: 30 dev/dk'YA KADAR AYARLANIR

ŞİŞELER: YATAY EKSENDE DÖNER

NUMUNE: ŞİŞE İÇİNDE SÜREKLİ HAREKET EDER

Hız, süre ve şişe hacmini birlikte kaydet

TEMSİLİ ŞİŞE DÖNDÜRME ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Şişeyi ve Numuneyi Hazırla

Numune miktarına uygun şişeyi seç. Kapağı kapat ve şişeyi temiz tut.

Dengeli Yerleştir

Şişeleri miller üzerine doğru konumlandır. Düzenli temas ve kararlı dönüşü kontrol et.

Hızı Ayarla ve Döndür

Uygun ana mil hızını ve çalışma süresini belirle. Numune hazırlığını kontrollü yürüt.

Mil / merdane düzeninin hareketi, şişeleri yatay eksenleri etrafında döndürür. Numune şişe içinde sürekli hareket ederek karıştırılır. Şişenin boyutu ve numunenin özellikleri çalışma koşullarını etkiler; karşılaştırmalı hazırlıklarda aynı yerleşim, hız ve süre kullanılmalıdır.

Dijital ve Analog Modeller

LT-M0614, dijital kontrollü masa tipi modeldir. LT-M0615, analog kontrol seçeneğini sunar. Her iki model iki şişenin eş zamanlı döndürülmesini destekler.

30 dev/dk değeri ana milin azami hızını tanımlar. Şişe dönüşü; şişe çapı, mil teması ve yerleşimle ilişkilidir. Hazırlık sürecini seçilen modele ve şişeye uygun ayarla.

Şişe Hacimleri ve Hazırlık

Şişe seçenekleri 600 cc, 2500 cc ve 7000 cc hacimlerindedir. LT-M0615/1, /2 ve /3 kodları ilgili hacimleri tanımlar. Şişeler opsiyonel olarak temin edilir.

Şişeyi numune miktarına göre seç ve kapak bağlantısını kontrol et. Çalışma sonunda cihazı durdur, şişeyi al ve bir sonraki numune için temizle; kullanılan hacmi ve süreyi kaydet.

Model Seçenekleri ve Teknik Özellikler

LT-M0614 / LT-M0615 | Masa tipi modeller ve şişe seçenekleri

Model / Özellik	Değer / Açıklama
LT-M0614	Masa tipi dijital kontrollü model
LT-M0615	Masa tipi analog kontrollü model
Şişe Kapasitesi	2 şişe • Eş zamanlı döndürme
Ana Mil Hızı	Ayarlanabilir • En fazla 30 dev/dk
Döndürme Prensibi	Şişenin yatay ekseni etrafında dönüşü
Kullanım	Numune karıştırma ve laboratuvar hazırlığı
LT-M0615 Elektrik Beslemesi	220 V • 50 Hz • 1 faz

Şişe Kodu	Hacim / Temin
LT-M0615/1	600 cc • Opsiyonel şişe
LT-M0615/2	2500 cc • Opsiyonel şişe
LT-M0615/3	7000 cc • Opsiyonel şişe

Şişe Yerleşimini ve Dönüşü Kontrol Et

Uygun şişe ve kapak kullan; mil temasını ve kararlı dönüşü doğrula. Hazırlık kaydında numune tanımı, şişe hacmi, ana mil hızı ve çalışma süresini birlikte belirt.

Şişede Numune Hazırlama İş Akışı

01
Seç / Hazırla
Şişeyi seç ve numuneyi içine al.

02
Yerleştir
Şişeyi döndürme millerine yerleştir.

03
Döndür
Uygun hız ve sürede numuneyi karıştır.

04
Tamamla
Cihazı durdur ve hazırlanan numuneyi al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/sise-dondurme-test-cihazi-masa-tipi-modeli/