# Şişe Döndürücü

LT-A1020 | Şişe ve kavanoz içinde laboratuvar numune işleme

Kauçuk kaplı silindirler • Değişken hız • Katmanlı şişe yerleşimi



## 20 L

**NOMİNAL KAPASİTE**

## Ayarlanabilir

**DEĞİŞKEN DÖNÜŞ HIZI**

Plastik, seramik ve metal kaplarla uyum • 220 V, 50 Hz, 3 faz

LT-A1020

# Fotoğraflar ve Bileşenler

Yatay şişeler, kauçuk kaplı silindirler, taşıyıcı şase ve kumanda bölümü

LT-A1020, bulamaç içeren kapları kendi yatay eksenleri çevresinde döndürür. Kauçuk kaplı silindirlerin aktardığı hareket, numunenin kap içinde karıştırılmasını ve uygun düzenle öğütülmesini destekler.

**YATAY ŞİŞE YERLEŞİMİ**

Şişeler, yan yüzeyleri silindirlere temas edecek biçimde yerleştirilir.

**KAUÇUK KAPLI SİLİNDİRLER**

Silindirler, temas yoluyla şişeye dönüş hareketi aktarır.



**TAŞIYICI ŞASE**

Katmanlı çerçeve, çalışma seviyelerini ve silindirleri taşır.

**KUMANDA BÖLÜMÜ**

Alt ön panel, çalışma kumandalarını ve göstergeleri bir araya getirir.



Şişe yerleşimi ve silindir teması




Alt ön kumanda paneli

LT-A1020

# Silindir Temasıyla Yatay Dönüş

Silindir hareketi • Kap dönüşü • Sürekli numune hareketi

ŞİŞE / KAVANOZ

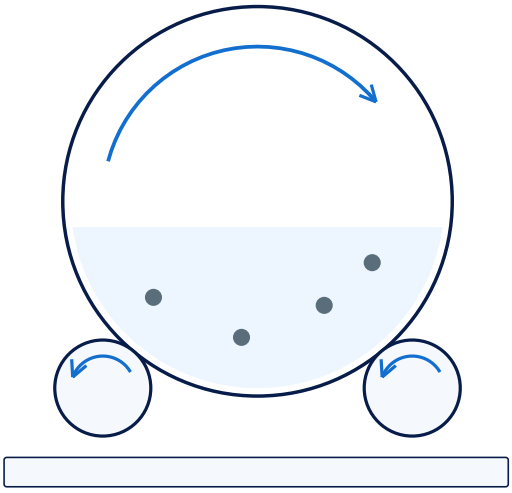

KAUÇUK KAPLI SİLİNDİRLER

## Hareket Aktarımı

Kauçuk yüzey ile kap arasındaki temas, kap gövdesinin kendi ekseninde dönmesini sağlar.

## Karıştırma

Kap içindeki bulamaç, dönüş boyunca yer değiştirerek karışım hareketi oluşturur.

## Öğütme Düzeni

Uygun kap ve yönteme göre kullanılan öğütme ortamı, numune boyutunun küçültülmesini destekler.

Dönüş hızı ve çalışma süresi, kap çapı, numune miktarı ve hedeflenen işleme göre seçilir. Karşılaştırmalı çalışmalarda aynı kap ve hazırlama koşullarının kullanılması sonuçların değerlendirilmesini kolaylaştırır.

## Kap Malzemesi Seçimi

Plastik, seramik ve metal kavanozlarla çalışılabilir. Kabı numune ve çalışma yöntemine göre seç; kapağı kapat ve silindirler üzerinde dengeli yerleşimi kontrol et.

## Esnek Katman Düzeni

Şişe yerleşimi laboratuvar ihtiyacına göre yapılandırılabilir. Ek katmanlar, farklı kap düzenlerine uyumu destekler. 20 L kaplara yönelik düzenleme seçenekleri bulunur.

LT-A1020

# Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A1020 • Kapasite, silindir sistemi ve elektrik beslemesi

| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| **Ürün Kodu** | LT-A1020 |
| **Nominal Kapasite** | 20 L |
| **Temel İşlem** | Karıştırma / uygun düzenle öğütme |
| **Kap Hareketi** | Kendi yatay ekseninde dönüş |
| **Silindir Yüzeyi** | Kauçuk kaplı |
| **Hız Kontrolü** | Değişken hızlı sürücü |
| **Uyumlu Kap Malzemeleri** | Plastik / seramik / metal |
| **Yerleşim Düzeni** | Yapılandırılabilir, ek katman seçenekleri |
| **Elektrik Beslemesi** | 220 V, 50 Hz, 3 faz |

### Dönüş ve Numune Kayıtları

Kap türü, numune miktarı, doluluk, hız ayarı ve çalışma süresini birlikte kaydet. Şişe konumunu ve numune etiketini işlem boyunca koru.

## Numune İşleme Akışı

**01**
**Kabı Hazırla**
Numuneyi uygun kaba al; kapağı kapat.

**02**
**Yerleştir**
Kabı silindirlere dengeli biçimde yerleştir.

**03**
**Hızı Ayarla**
Yönteme uygun dönüşü ve süreyi seç.

**04**
**Numuneyi Al**
Dönüş durduktan sonra kabı al ve boşalt.

**Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/sise-dondurucu/**